



FKG
swiss endo



FR

S-Apex™

La précision et le design

Un design compact et très léger

Conçu autour de la plus haute technologie standard de l'industrie, le S-Apex™ permet des mesures canalaires en milieu sec ou humide avec une précision hors pair.

Mesure de haute précision

Utilisant la technique des ratios, S-Apex indique très précisément la localisation de la lime. La mesure n'est pas affectée par la présence ou l'absence de sang, d'électrolytes, de solution saline, d'eau ou de peroxyde d'hydrogène.

Pas de remise à zéro

Il n'est pas nécessaire de remettre à zéro l'appareil avant de mesurer chaque canal.

Calibration automatique


La calibration automatique garantit une grande précision et neutralise les effets des changements de température et d'humidité dans le canal durant le traitement endodontique.

Grand écran LCD en couleur

L'affichage LCD en couleur est facile à lire, avec un contraste optimal.

S-Apex mesure les canaux radiculaires avec exactitude et précision

Les positions de la barre clignotante verte et de la barre de mémoire bleue peuvent être fixées pour la mesure de longueur et l'alésage du canal.

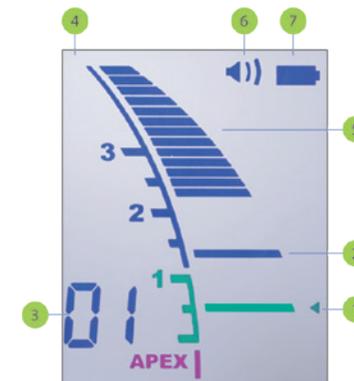

1 – Barre clignotante verte

Le point de référence pour la mesure ou l'alésage peut être fixé sur n'importe quelle position entre le repère 2 indiqué sur l'écran et APEX.

2 – Barre de mémoire bleue

Cette barre est utile pour marquer le début d'une forte courbe ou un point à distance de l'apex. Elle est très utile comme repère pour le changement de lime durant l'alésage.

La barre de mémoire peut être réglée sur n'importe quelle position jusqu'à APEX.

3 – Affichage de l'information

Pendant la mesure : Indique le nombre de barres restant avant d'atteindre la barre clignotante verte.

En veille : Indique le numéro de mémoire pour la barre clignotante verte.

4 – Écran à cristaux liquides LCD

5 – Barres de progression dans le canal

6 – Indicateur de volume sonore (éteint, faible, fort)

7 – Indicateur de niveau de charge



La mesure est activée dès que la lime est insérée dans le canal. Le nombre de barres de progression restant avant d'atteindre la barre clignotante verte s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.



Dès que la lime atteint une position proche de l'apex, la barre de progression devient verte ce qui confirme la proximité de l'apex.



Le petit triangle vert situé à droite de l'échelle de mesure indique le point de référence.



La position de l'apex est représentée par le mot APEX. Les barres dans cette zone sont de couleur rose.

S-Apex est compact, léger et dessiné pour tenir facilement dans votre main. Il se place aisément sur une tablette, sur le patient ou là où il vous plaira.



Spécifications



S-Apex - Spécifications

Nom	S-Apex
Modèle	RCM-7 Type FKG
Référence FKG	08.910.00.000.FK
Alimentation	DC 4.5 V (piles 1,5 v AAA DC)
Puissance nominale	0.2 W
Dimensions	largeur 60 mm x Longueur 103 mm x Hauteur 57 mm
Poids	Approx. 110 g

Inclus

- 1 × Cordon de la sonde
- 3 × Porte-limes
- 5 × Contre-électrodes
- 1 × Testeur
- 3 × Piles sèches alcalines



Accessoires optionnels

- Porte-lime long
- Câble de transmission (obligatoire pour connection avec le Rooter S)



FKG Ref. 08.911.00.006.FK FKG Ref. 08.911.00.001.FK



FKG Dentaire Sàrl

Société suisse fondée en 1931, FKG Dentaire Sàrl a connu un nouvel essor en 1994, lorsque Jean-Claude Rouiller a pris les rênes de l'entreprise.

Il l'a amenée à la pointe du développement, de la fabrication et de la distribution de produits dentaires destinés aux omnipraticiens, aux endodontistes et aux laboratoires.

La stratégie de FKG est axée sur des produits innovants et de haute précision et sur la conception d'instruments spécifiquement dédiés au monde dentaire, dans l'objectif d'offrir des solutions répondant aux besoins les plus pointus des utilisateurs.

En 2011, Thierry, fils de Jean-Claude Rouiller, a repris la direction de FKG. Sous son impulsion, le réseau de distributeurs s'est fortement développé et permet aux instruments de FKG d'être disponibles dans une centaine de pays dans le monde entier.

En 2012, le Swiss Venture Club a récompensé FKG pour son dynamisme, la qualité de ses produits et son sens de l'innovation.

Dotée depuis 2013 d'une salle blanche, FKG Dentaire développe sa gamme de produits stériles.

En 2013 et 2014, des centres de formation, disposant d'infrastructures de pointe, ont été inaugurés à La Chaux-de-Fonds, Dubai et Oslo.

L'entreprise est certifiée selon les normes et exigences réglementaires.

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Switzerland
T+41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch

