



# BC UNIVERSAL SEALER

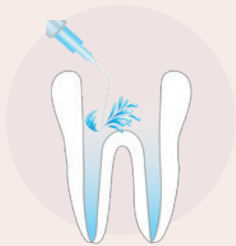

## ES

- Irrigue el conducto radicular y séquelo con una punta de papel.

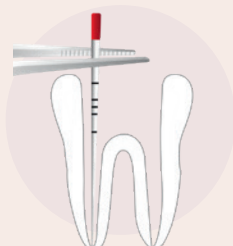


## IT

- Irrigare il canale radicolare e asciugarlo con una punta di carta.

## PT


- Irrigar o canal radicular e secar com um cone de papel.

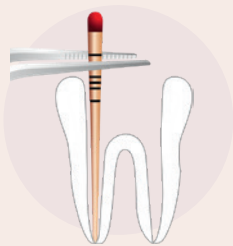

- Seleccione el cono maestro e insértele suavemente hasta la longitud de trabajo.
- Si el cono maestro queda muy apretado en el conducto radicular, puede que no llegue hasta la longitud de trabajo.

- Selezionare il cono master della misura adeguata da inserire facilmente nella lunghezza di lavoro.
- Se il cono master incontra resistenza all'interno del canale radicolare, potrebbe non raggiungere l'intera lunghezza di lavoro..

- Selecionar o cone principal, que é inserido delicadamente até ao comprimento de trabalho.
- Se o cone principal ficar muito apertado no canal radicular, pode não alcançar o comprimento de trabalho.

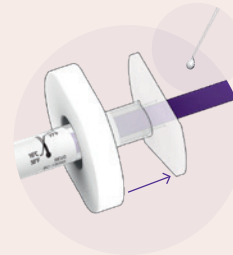

- Acople un soporte de extensión en la jeringa
- Acople la punta en la jeringa y asegúrese de comprobar que de la punta sale bien el BC Universal Sealer.

- Attaccare un supporto di prolunga alla siringa
- Collegare il puntale alla siringa e verificare che il BC Universal Sealer venga erogato correttamente dall'estremità del puntale.




- Fixar um suporte de extensão na seringa
- Ligar a ponta da seringa e verificar se BC Universal Sealer está a ser bem descarregado da extremidade da ponta.



## INFO



# BC UNIVERSAL SEALER

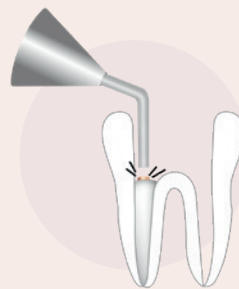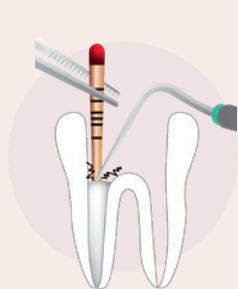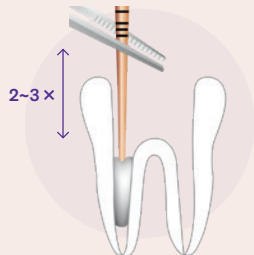

## ES

- Introduzca la punta en el tercio medio del conducto radicular y rellene lentamente con BC Universal Sealer hasta el nivel del orificio. Preste atención a que la punta no apriete demasiado el conducto radicular.
- Empuje el émbolo lentamente para inyectar bien.

- Introduzca el cono maestro en el conducto radicular y bombee suavemente durante 2-3 veces.
- Añada un cono accesorio si el conducto radicular es ancho.

- Corte el cono maestro a nivel del orificio y empaque con el instrumento.

## IT

- Inserire il puntale nel terzo centrale del canale radicolare ed erogare lentamente BC Universal Sealer fino a livello dell'orifizio canalare. Prestare attenzione che il puntale non si blocchi all'interno del canale radicolare.
- Spingere lentamente lo stantuffo per garantire una corretta erogazione.

- Inserire il cono master nel canale radicolare con delicati movimenti di "va e vieni" per 2-3 volte.
- Aggiungere un cono accessorio se il canale radicolare è ampio.

- Tagliare il cono master a livello dell'orifizio radicolare e compattare con l'apposito strumento.

## PT

- Inserir a ponta no terço central do canal radicular e encher lentamente com BC Universal Sealer até ao nível do orifício. A ponta não pode ficar demasiado apertada no canal radicular.
- Empurrar o émbolo lentamente para injetar bem.

- Inserir o cone principal no canal radicular e bombear delicadamente 2-3 vezes.
- Adicionar o cone acessório quando o canal radicular estiver largo.

- Cortar o cone principal ao nível do orifício e comprimir com o instrumento.

Obturation  
Done

