

R-Motion® Glider




R-Motion® 30




Movimiento reciprocante (sentido antihorario)



- Cree un acceso coronal y radicular en línea recta
- Utilice una lima manual ISO 010 para explorar el conducto
- Determine la longitud de trabajo (LT)

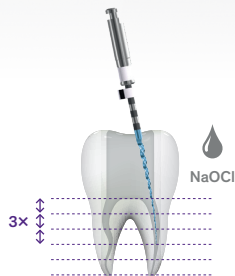

- Avance con **R-Motion Glider** hasta la LT **con con movimientos suaves de entrada y salida de 2-3 mm** (máx. 3)
- Irrigue y repita el proceso

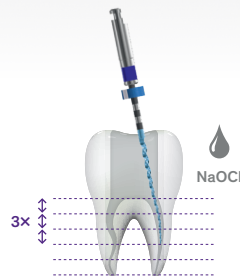

- Introduzca la **lima de conformación R-Motion apropiada con movimientos suaves de entrada y salida 2-3 mm** (máx. 3), aplicando muy poca presión apical y dejando que la lima penetre pasivamente en el conducto hasta alcanzar la LT
- Irrigue y repita el proceso



- Una vez haya dado forma al conducto, proceda a limpiarlo
- Obture el conducto con La punta GP y el sellador adecuados

R-Motion®



INFO

Radiografías
preoperatorias



Preparación del
acceso



Determinación
de la longitud de
trabajo (LT)



PREENSANCHAMIENTO

R-Motion
Glider



15/03v

R-Motion
Glider C



15/03v

hasta la LT

Se recomienda usar el R-Motion Glider C para los conductos que necesitan un instrumento de mayor rigidez o si el R-Motion Glider no puede avanzar más y no llega a alcanzar la longitud de trabajo.



SELECCIÓN DE LIMA DE CONFORMACIÓN*

Conducto
estrecho

R-Motion
20



20/04

hasta la LT

Conducto
estándar

R-Motion
30



30/04

hasta la LT

Conducto
mediano

R-Motion
40



40/04

hasta la LT

Conducto
ancho

R-Motion
50



50/04

hasta la LT

*La mayoría
de los casos*



Limpie y
obture



FKG
swiss endo

* Seleccione el instrumento de conformación de lima única R-Motion que se adapte mejor a la anatomía del conducto que vaya a tratar. Si las radiografías no muestran con claridad la anatomía del conducto, calibre con limas manuales.



1639