

RACE® EVO

**THE
RACE
LEGACY**




SICUREZZA. EFFICACIA. CONTROLLO DELICATO.

www.fkg.ch/race-evo

Una Gamma che Migliora con l'Evoluzione


RACE® EVO è l'evoluzione del rinomato sistema rotante RaCe. La grande affidabilità originale di RaCe, combinata con un trattamento termico esclusivo e una velocità di rotazione superiore, rende **RACE® EVO** uno strumento più che mai sicuro, maneggevole ed efficace.

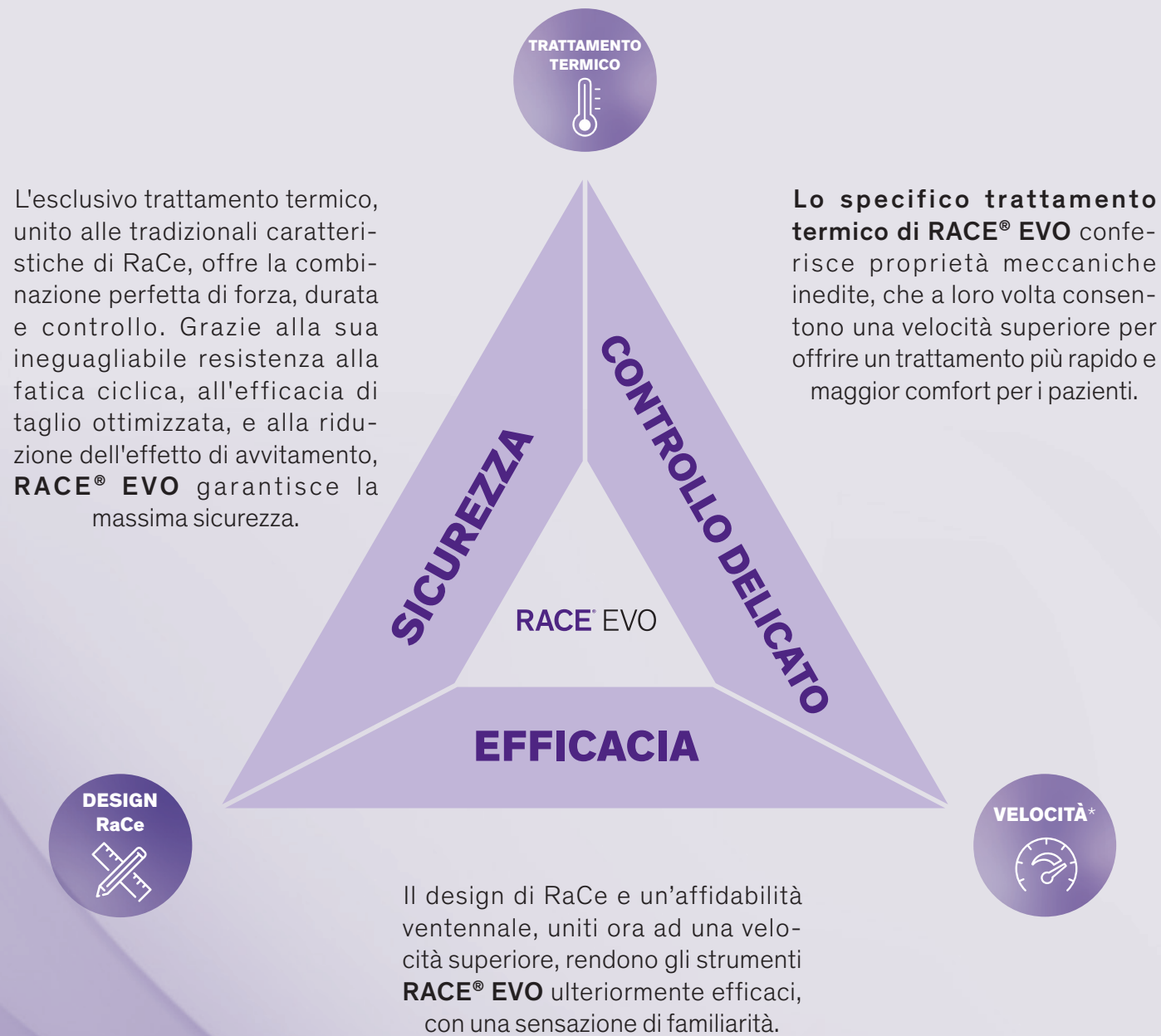


* FKG raccomanda l'utilizzo degli strumenti RACE® EVO con una velocità di 1.000 giri/min.

Il Tuo Approccio. La Tua Scelta.

RACE® EVO consente di scegliere l'approccio terapeutico più adeguato. La vasta gamma di strumenti permette di trattare con successo le diverse anatomie dei canali. Sarà sufficiente iniziare con la sequenza base, per poi passare agevolmente alla misura successiva sagomando maggiormente il canale se necessario.

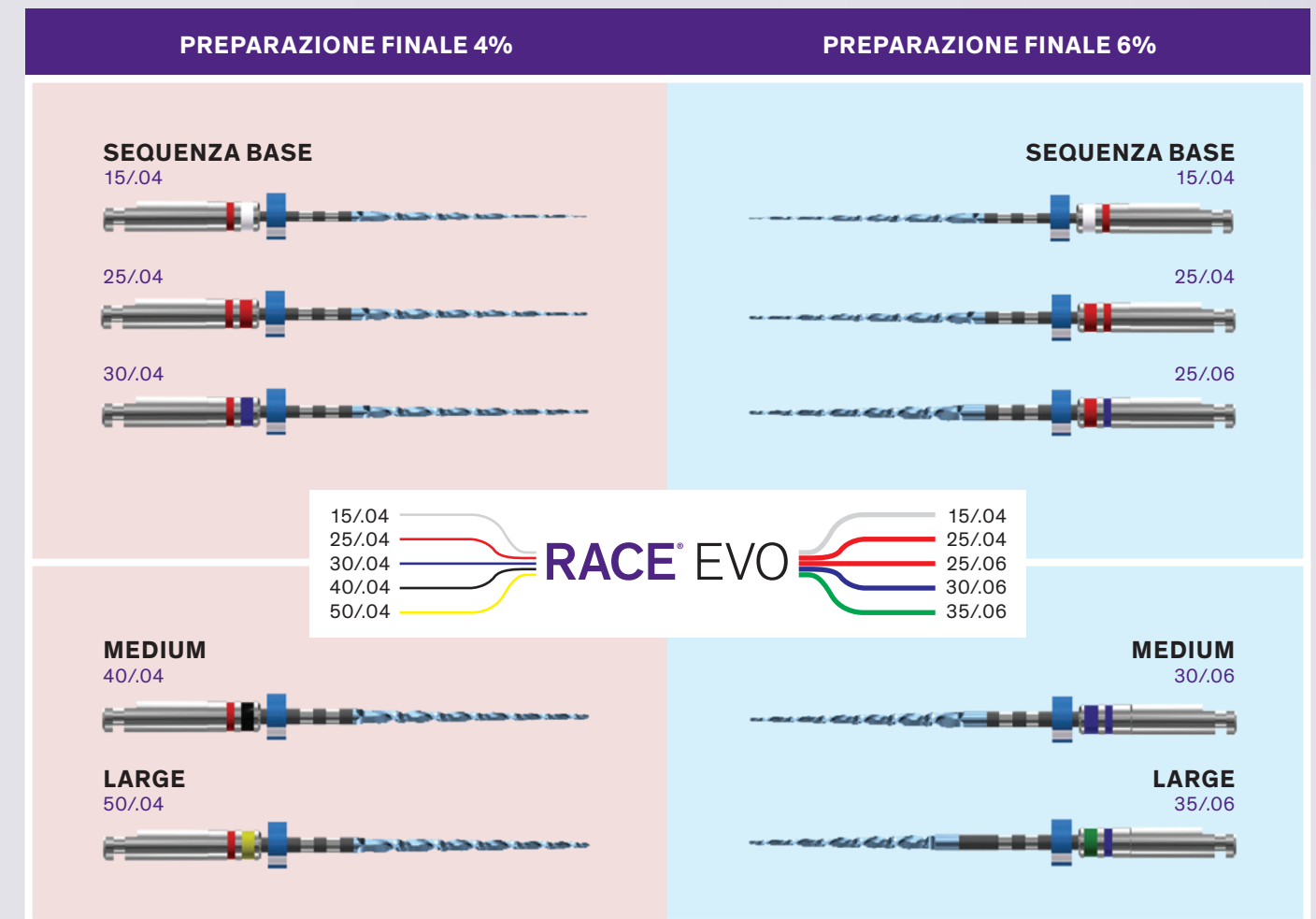

UNA SEQUENZA PER LA MAGGIOR PARTE DEI CASI

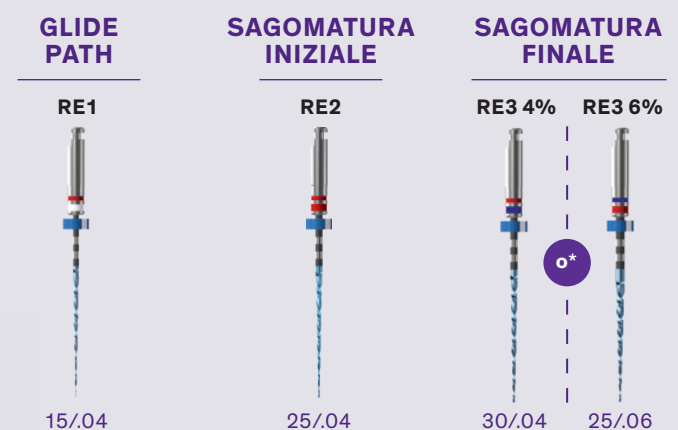

* Selezionare lo strumento di sagomatura in base all'approccio terapeutico.

Maggiore Flessibilità per un Nuovo Livello di Affidabilità

Gli strumenti **RACE® EVO** conservano le stesse caratteristiche di progettazione di RaCe, con l'ulteriore vantaggio di una maggiore flessibilità. L'esclusivo processo di trattamento termico, indicato dal colore blu dello strumento, offre fino a 1,4 volte la flessibilità di RaCe per ottenere prestazioni superiori e una progressione più agevole.



Prima dell'intervento



Dopo l'intervento


© Dott. Andreas Krokidis (Grecia), Tutti i diritti riservati

FLESSIBILITÀ
x 1,4*

Maggiore Resistenza alla Fatica Ciclica

RACE® EVO offre una resistenza alla fatica ciclica fino a 2,8 volte superiore rispetto a quella del suo predecessore RaCe. Ciò riduce il rischio di rottura dello strumento, consentendo una maggiore velocità di rotazione e migliorando sensibilmente la sicurezza e il comfort del paziente.

RESISTENZA
x 2,8**

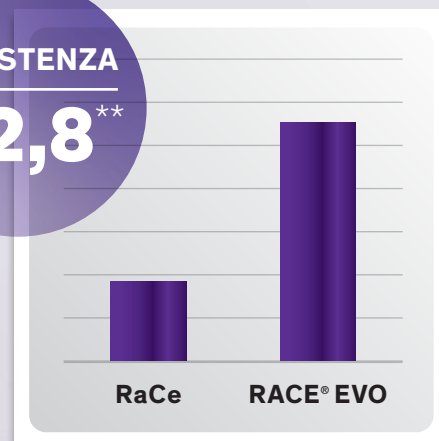


* In base ai risultati di laboratorio interni, utilizzando RACE® EVO 4%.

** In base ai risultati di laboratorio interni; tempo di frattura alla velocità raccomandata.


Maggiore Efficienza di Taglio

Il design triangolare con bordi taglienti di **RACE® EVO**, insieme a una velocità di rotazione più elevata, offre un'efficacia di taglio fino a 1,5 volte superiore rispetto a quella di RaCe.

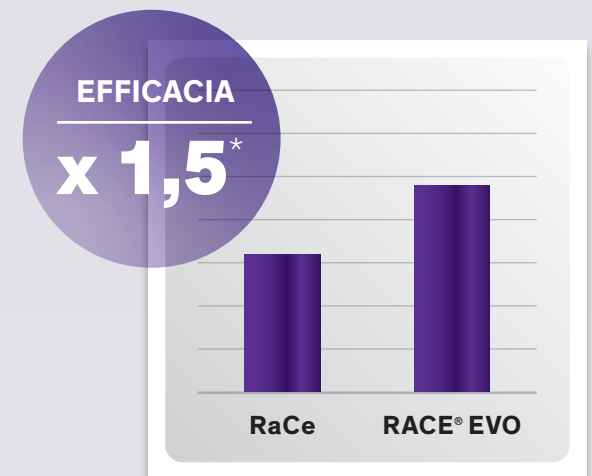

Massima Affidabilità da oltre 20 Anni

Oltre a una maggiore flessibilità, ad una migliore resistenza alla fatica ciclica e alle capacità di taglio potenziate, gli strumenti **RACE® EVO** integrano gli stessi vantaggi di RaCe.

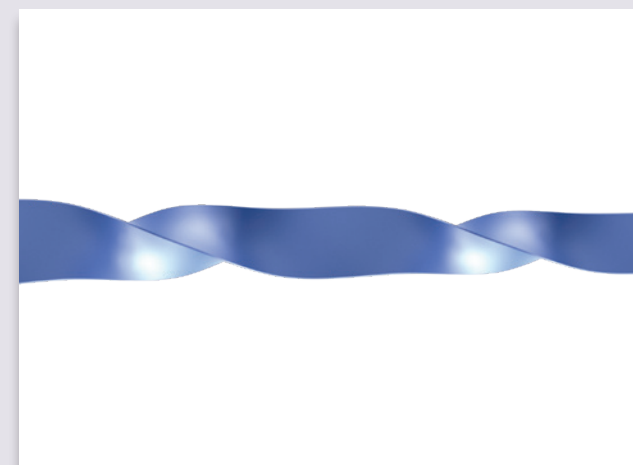

Il design esclusivo dei bordi taglienti riduce l'effetto di avvitamento e offre un maggiore controllo della progressione nel canale.



Il design unico della punta di sicurezza arrotondata di RACE® EVO consente una progressione efficace dello strumento lungo il canale.

* In base ai risultati di laboratorio interni, utilizzando RACE® EVO 4%.

RACE[®] EVO

Offre i vantaggi del design di RaCe uniti al trattamento termico e ad una velocità superiore:





+ 40%*
maggiore flessibilità

x 2,8*
maggiore resistenza alla fatica ciclica

+ 50%*
maggiore efficienza di taglio

* In base ai risultati di laboratorio interni in confronto a RaCe[®].

Riferimenti dei Prodotti

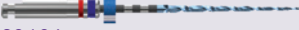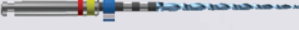SEQUENZE			
● RACE EVO 4% sequence (3 files per blister)			
	}	21mm	S1.7B0.00.SCV.FK
		25mm	S1.7B0.00.SCW.FK
		31mm	S1.7B0.00.SCX.FK
15/.04			
25/.04			
30/.04			
● RACE EVO 6% sequence (3 files per blister)			
	}	21mm	S1.7B0.00.SCY.FK
		25mm	S1.7B0.00.SCZ.FK
		31mm	S1.7B0.00.SDA.FK
15/.04			
25/.04			
25/.06			
RICAMBI			
● ● RACE EVO 15/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DG.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0FZ.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DH.FK
● ● RACE EVO 25/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DI.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GB.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DJ.FK
● RACE EVO 30/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DK.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GC.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DL.FK
● RACE EVO 40/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DM.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GE.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DN.FK
● RACE EVO 50/.04			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DO.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GF.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DP.FK
● RACE EVO 25/.06			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DQ.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GH.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DU.FK
● RACE EVO 30/.06			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DV.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GI.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0DW.FK
● RACE EVO 35/.06			
	6×	21mm	S1.7B0.00.0DX.FK
	6×	25mm	S1.7B0.00.0GJ.FK
	6×	31mm	S1.7B0.00.0GU.FK

● approccio 4% ● approccio 6%

PUNTE DI CARTA		
Confezione da 200 punte di carta		
●	30/.04	08.610.04.030.BC
●	40/.04	08.610.04.040.BC
●	50/.04	08.610.04.050.BC
●	25/.06	08.610.06.025.BC
●	30/.06	08.610.06.030.BC
●	35/.06	08.610.06.035.BC
GUTTA PERCHA		
Confezione da 60 Gutta Percha		
●	30/.04	08.600.04.030.RE
●	40/.04	08.600.04.040.RE
●	50/.04	08.600.04.050.RE
●	25/.06	08.600.06.025.RE
●	30/.06	08.600.06.030.RE
●	35/.06	08.600.06.035.RE
TOTALFILL [®] BC POINTS [™]		
Confezione da 60 BC Points		
●	30/.04	08.650.04.030.RE
●	40/.04	08.650.04.040.RE
●	50/.04	08.650.04.050.RE
●	25/.06	08.650.06.025.RE
●	30/.06	08.650.06.030.RE
●	35/.06	08.650.06.035.RE
TOTALFILL [®] BC SEALER [™]		
Siringa da 2g + 15 TotalFill BC Tips		
		08.650.00.007.XX
TOTALFILL [®] BC POINTS [™] HIFLOW		
Confezione da 60 BC Points HiFlow		
●	30/.04	08.650.04.030.HF
●	40/.04	08.650.04.040.HF
●	50/.04	08.650.04.050.HF
TOTALFILL [®] BC SEALER [™] HIFLOW		
Siringa da 1,5g + 15 TotalFill BC tips		
		08.650.00.008.XX

www.fkg.ch/race-evo

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Switzerland
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch

