


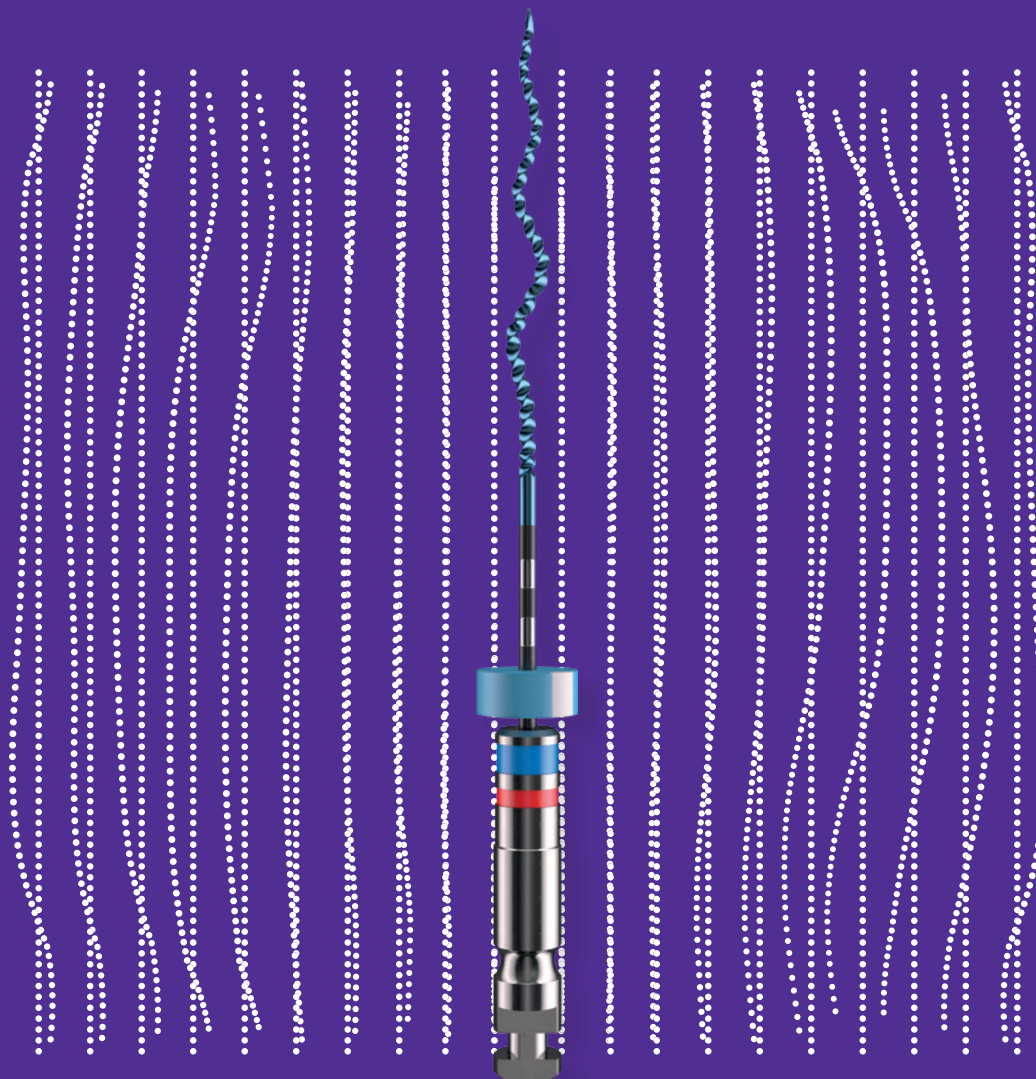

Adaptable

Rise With the One.

UNA sola lima de conformación para las múltiples
anatomías de conductos radiculares.

Una nueva generación.




XP-endo® Rise es la nueva generación de nuestra línea adaptable a través de una lima única de conformación.

Sencillo y más previsible, XP-endo® Rise te proporciona más seguridad y control.

Descubre un nuevo diseño creado para realizar procedimientos más cortos y ágiles.

Un glidepath patentado
+ Una lima de conformación
= Un procedimiento sencillo

One Glider

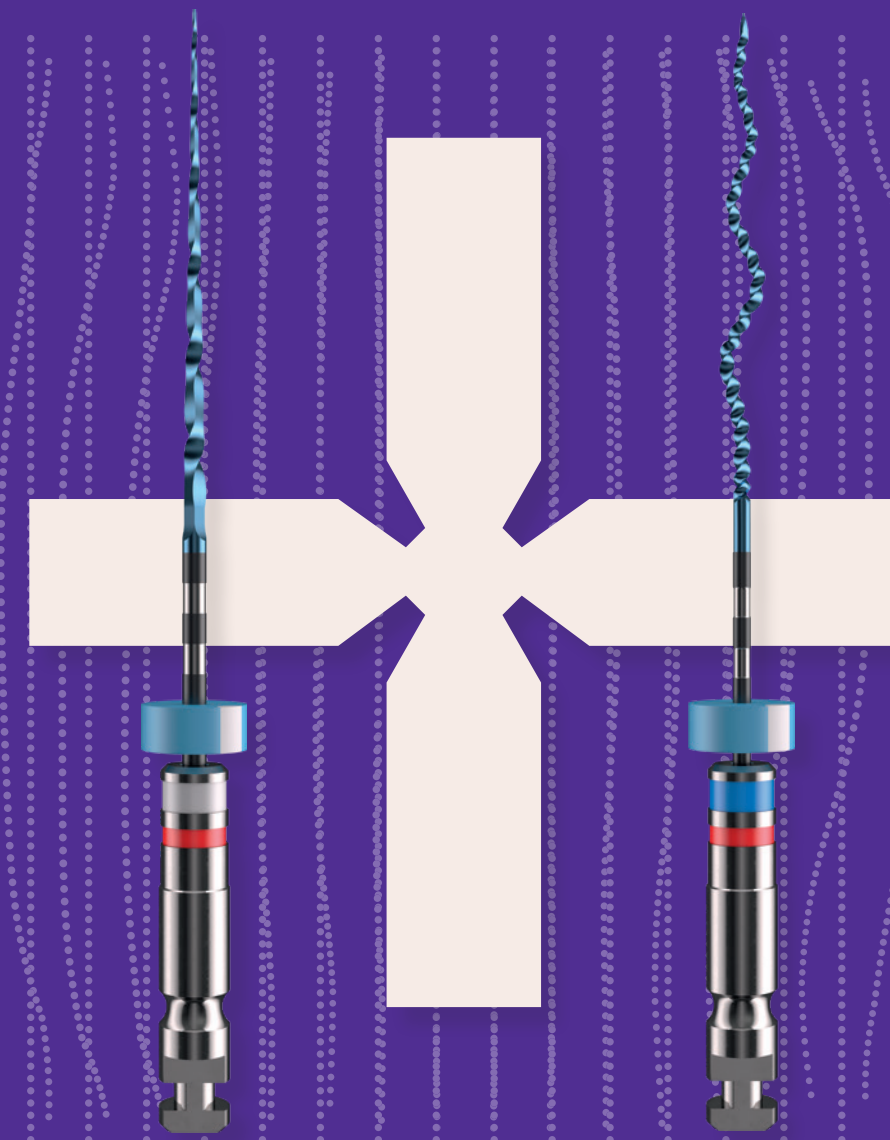


XP-endo®
Rise Glider

XP-endo®
Rise Shaper


Un sistema totalmente exclusivo que ofrece previsibilidad, una excelente capacidad para adaptarse al conducto y el uso repetido en el tratamiento primario.

La excelente resistencia de XP-endo® Rise combinada con todas sus ventajas, garantizan tiempos de procedimiento reducidos^{1,2}.

XP-endo® Rise Shaper presenta una nueva punta

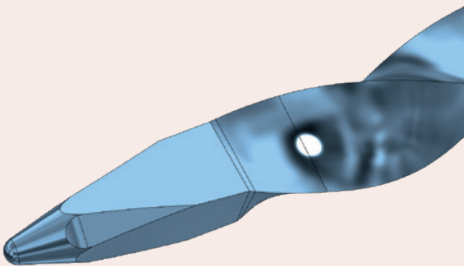


Punta XP-endo® Shaper primera generación : 3 caras

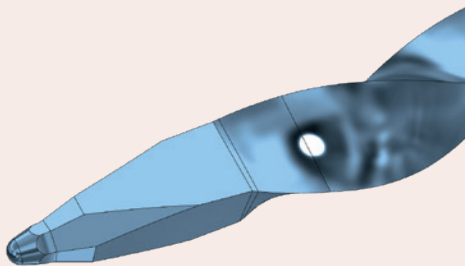

Punta XP-endo® Rise Shaper nueva generación : 6 caras

Excelente resistencia a la fatiga ciclica*


Número medio de ciclos hasta la fractura

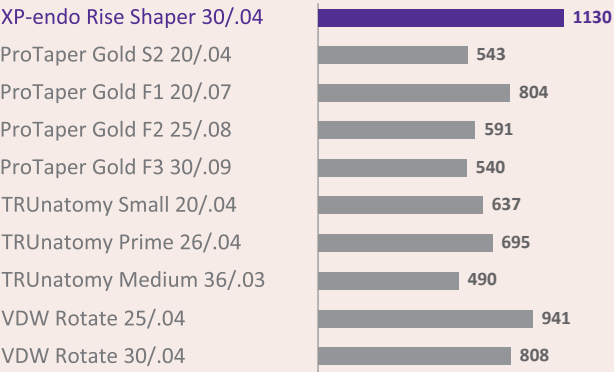

MÁS ALTO ES MEJOR

Flexibilidad superior*

Torque medio [Ncm] requerido para doblarla a un ángulo de 45°

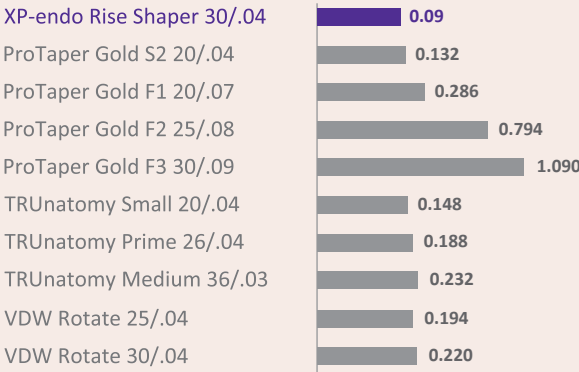


MÁS BAJO ES MEJOR

* Prueba interna. Datos en archivo.


¹ Azim AA, Piasecki L, da Silva Neto UX, Cruz ATG, Azim KA. XP Shaper, A Novel Adaptive Core Rotary Instrument: Micro-computed Tomographic Analysis of Its Shaping Abilities. J Endod. 2017;43(9):1532-1538. doi:10.1016/j.joen.2017.04.022

² AlOmari T, Mustafa R, Al-Fodeh R, El-Farraj H, Khaled W, Jamleh A. Debris Extrusion Using Reciproc Blue and XP Endo Shaper Systems in Root Canal Retreatment. Int J Dent. 2021;2021:6697587. Published 2021 Mar 24. doi:10.1155/2021/6697587

Alta reducción de las bacterias - hasta el 99,5 %¹

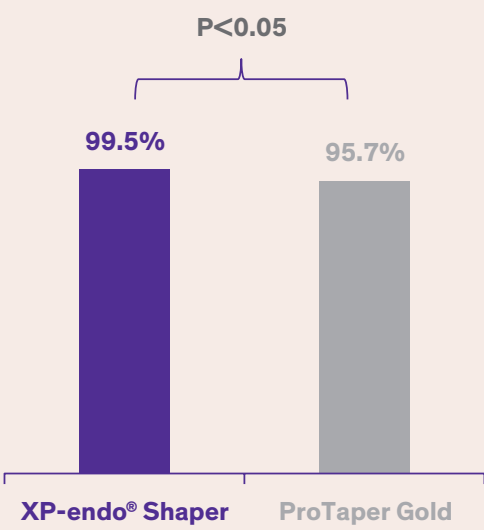

Alta remoción de los detritos en los conductos en C (hasta el 98,9 %)²

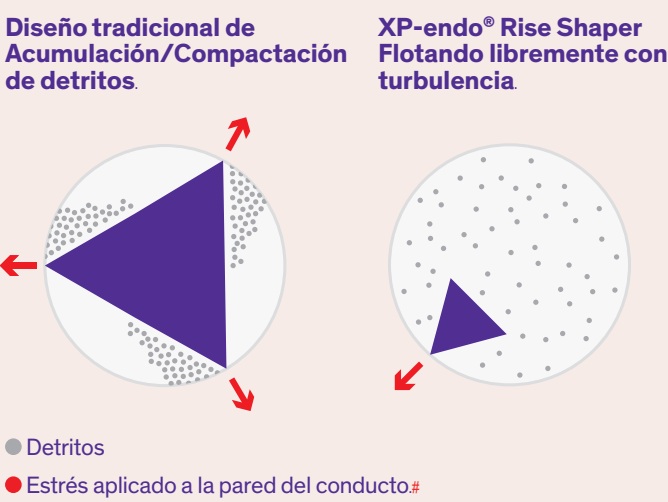

Conserva la anatomía de la raíz




* Prueba interna. Datos en archivo.#

¹ Siddique R, Nivedhitha MS, Ranjan M, Jacob B, Solete P. Comparison of antibacterial effectiveness of three rotary file system with different geometry in infected root canals before and after instrumentation-a double-blinded randomized controlled clinical trial. BDJ Open. 2020;6:8. Published 2020 Jun 8. doi:10.1038/s41405-020-0035-7. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. No changes made.

² Zhao Y, Fan W, Xu T, Tay FR, Gutmann JL, Fan B. Evaluation of several instrumentation techniques and irrigation methods on the percentage of untouched canal wall and accumulated dentine debris in C-shaped canals. Int Endod J. 2019;52(9):1354-1365. doi:10.1111/iej.13119

Finisher & Finisher R

Las soluciones universales para la limpieza mecánica

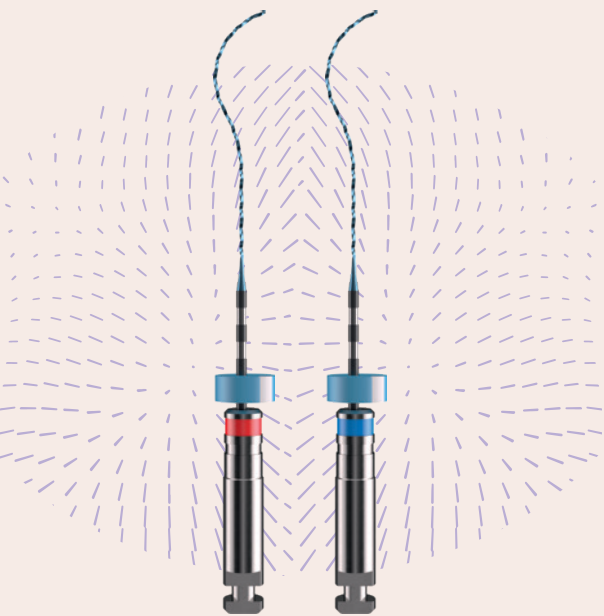


Hasta un 98 % de
reducción bacteriana
en el conducto principal¹

Excelente resistencia
a la fatiga clínica en comparación
con las limas rotatorias*

XP-endo® Rise Retreatment

Simplifique su protocolo para el retratamiento

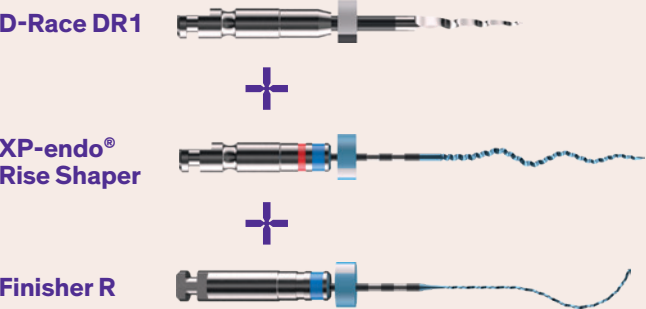

XP-endo® Shaper envuelto con gutapercha



© Dr. Klaus Lauterbach (Alemania) todos los derechos reservados

2x más
rápido
XP-endo® Shaper vs. un producto
convencional de la competencia
para realizar un proceso de
retratamiento²

Elimina 2x
más los detritos
Finisher R vs. PUI³

Referencias de los Productos

SECUENCIAS

XP-endo® Rise Secuencias (3×2 uds. por blíster)			
	15/.04	21mm	S1.XB0.00.SAI.FK
	25/.04	25mm	S1.XB0.00.SAG.FK
	30/.04	31mm	S1.XB0.00.SAJ.FK

XP-endo® Rise Retreatment (1×3 uds. por blíster)

	30/.10 (15mm)	21mm	S1.XB0.00.SAK.FK
	30/.04	25mm	S1.XB0.00.SAH.FK
	30/.00	31mm	S1.XB0.00.SAL.FK

REPOSICIONES

XP-endo® Rise Glider			
	15/.04	6× 21mm	S1.7B0.00.0HN.FK
		6× 25mm	S1.7B0.00.0HO.FK
		6× 31mm	S1.7B0.00.0HP.FK

XP-endo® Rise Shaper			
	30/.04	6× 21mm	S1.XB0.00.0AR.FK
		6× 25mm	S1.XB0.00.0AS.FK
		6× 31mm	S1.XB0.00.0AT.FK

XP-endo® Rise Shaper			
	30/.04	3× 21mm	S1.XB0.00.0AU.FK
		3× 25mm	S1.XB0.00.0AV.FK
		3× 31mm	S1.XB0.00.0AW.FK

Finisher			
	25/.00	3× 21mm	S1.XB0.00.0AX.FK
		3× 25mm	S1.XB0.00.0AY.FK
		3× 31mm	S1.XB0.00.0AZ.FK

Finisher R			
	30/.00	3× 21mm	S1.XB0.00.0BA.FK
		3× 25mm	S1.XB0.00.0BB.FK
		3× 31mm	S1.XB0.00.0BC.FK

PUNTAS DE PAPEL

Caja de 200 puntas de papel		
	30/.04	08.610.04.030.BC
	35/.04	08.610.04.035.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC

GUTTA PERCHA

Caja de 60 Gutta Percha		
	30/.04	08.600.04.030.RE
	35/.04	08.600.04.035.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™

Caja de 60 BC Points		
	30/.04	08.650.04.030.RE
	35/.04	08.650.04.035.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™

Jeringa 2g + 15 TotalFill BC Tips	
	08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

Caja de 60 BC Points HiFlow		
	30/.04	08.650.04.030.HF
	35/.04	08.650.04.035.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

Jeringa 1.5g + 15 TotalFill BC Tips	
	08.650.00.008.XX

* Prueba interna. Datos en archivo.

1 Azim AA, Akseil H, Zhuang T, Mashtare T, Babu JP, Huang GT. Efficacy of 4 Irrigation Protocols in Killing Bacteria Colonized in Dental Tubules Examined by a Novel Confocal Laser Scanning Microscope Analysis. J Endod. 2016;42(6):928-934. doi:10.1016/j.joen.2016.03.009

2 AlOmari T, Mustafa R, Al-Fodeh R, El-Farraj H, Khaled W, Jamleh A. Debris Extrusion Using Reciproc Blue and XP Endo Shaper Systems in Root Canal Retreatment.Int J Dent. 2021;2021:6697587. Published 2021 Mar 24. doi:10.1155/2021/6697587

3 De-Deus G, Belladonna FG, Zuolo AS, et al. XP-endo Finisher R instrument optimizes the removal of root filling remnants in oval-shaped canals.Int Endod J. 2019;52(6):899907. doi:10.1111/iej.13077



Empower Endo

Desde hace 90 años nuestro objetivo es proporcionar Calidad Suiza, precisión y confianza a los endodoncistas. Nuestro enfoque exclusivo está impulsado por la ambición de proporcionar el mejor cuidado dental, y con la convicción de que la búsqueda de la perfección nunca termina. Igual que tú, queremos ampliar los límites de lo posible combinando la investigación con el perfeccionamiento y la innovación.

¿Estás preparado para dar un cambio?