

Scout-RaCe


Séquence de cathétérisme mécanisé

Description

Scout-RaCe permet un cathétérisme plus rapide et meilleur qu'avec des instruments manuels. *Scout-RaCe* 10/.02 peut être utilisé directement après une lime manuelle ISO 08 jusqu'à la longueur de travail, suivi du *Scout-RaCe* 15/.02 et du *Scout-RaCe* 20/.02. Grâce à sa flexibilité exceptionnelle, *Scout-RaCe* suit parfaitement l'anatomie du canal.

Scout-RaCe est doté des caractéristiques suivantes :

- Flexibilité extrême grâce à la conicité .02
- Pointe de sécurité exclusive
- Design anti-vissage unique
- Arrêtes de coupe vives pour une meilleure efficacité
- Traitement électro-chimique pour améliorer la résistance du métal
- *SafetyMemoDisc*: pour maîtriser la fatigue du métal et contrôler le nombre d'utilisations

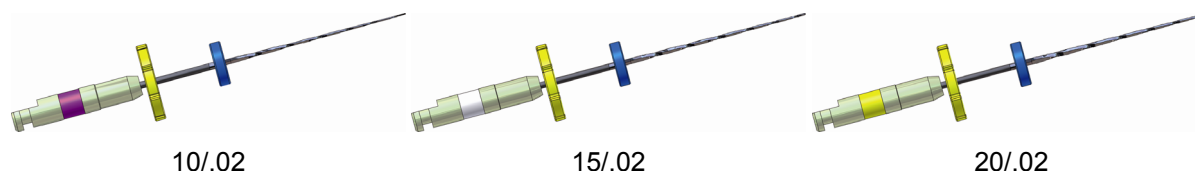

Disponibilité

- Assortiment (2 pces de chaque)
- Tailles individuelles (5 pces/boîte)