

## Communiqué de presse

La Chaux-de-Fonds, Suisse, Janvier 2014


### **FKG révolutionne le traitement endodontique avec la séquence BT-Race pour un traitement Biologique et Conservateur.**

**FKG Dentaire SA, La Chaux-de-Fonds (Suisse), met son expertise au service des dentistes et endodontistes. Pour faciliter leur travail et augmenter le confort des patients, elle lance sur le marché BT-Race, une séquence stérile et à usage unique de haute performance permettant de traiter la grande majorité des canaux avec seulement 3 instruments, assurant une finition à ISO 35/.04, ceci dans le respect absolu des concepts biologiques reconnus !**

Les traitements endodontiques requièrent une hygiène sans faille. Jusqu'ici, le praticien nettoyait et stérilisait les instruments à chaque utilisation et les stockait, prêts à l'usage. Emballés en salle blanche, stérilisés par rayons X, livrés en blisters sécables, ces nouveaux instruments de FKG offrent un gain de temps important en évitant la manutention et les coûts liés au processus de nettoyage et de stérilisation. L'usage unique évite tout risque de contamination croisée entre patients et diminue le stress des instruments (fatigue cyclique et torsion) et donc le risque de casse.

Selon Thierry Rouiller, CEO de l'entreprise chaux-de-fonnière, " FKG a développé des limes pourvues d'une pointe présentant plusieurs particularités techniques exclusives. Par exemple, la pointe BT est munie de 6 arêtes de coupe (au lieu de 3) permettant de travailler avec une séquence courte tout en évitant les microfissures. Elle coupe à un diamètre beaucoup plus petit que la taille ISO de l'instrument. "

" Autre nouveauté, précise Thierry Rouiller, la séquence contient un instrument dont la conicité est nulle. Malgré son diamètre, cette lime est extrêmement flexible, ce qui permet ainsi de préparer l'apex à ISO 35 en toute sécurité en garantissant un affaiblissement minimal de la dent. Elle offre également une efficacité de coupe excellente grâce à sa pointe BT. "

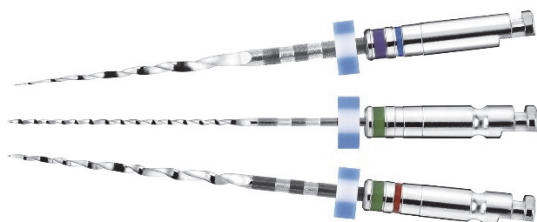

Pour des finitions supérieures à ISO 35/.04, les limes BT40 et le BT50 sont proposés stériles et à usage unique. Elles bénéficient également de la pointe BT et permettent d'atteindre des finitions à ISO 40/.04 et ISO 50/.04.

### **Quelques données techniques**



- Stérile et à usage unique
- Géométrie révolutionnaire de la pointe BT avec 6 arêtes de coupe coupant à un diamètre inférieur au diamètre ISO de l'instrument
- Anti-vissage
- Résistance accrue à la torsion et à la fatigue cyclique grâce au polissage électro-chimique
- Arêtes vives garantissant une efficacité de coupe optimale
- Séquence BT-Race pour une finition à ISO 35/.04; instruments complémentaires pour une finition à 40/.04 et 50/.04
- Longueurs disponibles : 21, 25 et 31 mm

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de

FKG Dentaire SA  
Crêt-du-Loche 4  
2304 La Chaux-de-Fonds  
Switzerland

T +41 32 924 22 44

[info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch)

[www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)