



Pressemitteilung

La Chaux-de-Fonds, Mai 2016

FKG Dentaire SA erweitert mit der Einführung des XP-endo® Finisher R seine Reihe der 3D-Instrumente

FKG Dentaire SA bringt weitere innovative Instrumente nach dem Vorbild des revolutionären, 2015 eingeführten XP-endo® Finisher auf den Markt. Die Reihe der Instrumente zur 3D-Reinigung des Wurzelkanals wird nun durch den **XP-endo® Finisher R (XP-FR)** zur Entfernung von Füllungsmaterial erweitert.

Der aus einer einzigartigen und äußerst flexiblen NiTi-Legierung gefertigte **XP-FR** verfügt über eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Ausdehnung, die seinen Arbeitsbereich im Vergleich zu herkömmlichen Instrumenten auf das bis zu 100-fache vergrößert, so dass er Bereiche der Kanalwände erreicht, die für klassische Feilen unzugänglich sind.

Nachdem das ursprüngliche Füllungsmaterial entfernt wurde, verbleibt, unabhängig von der eingesetzten Instrumentaltechnik, Debris im Kanal – insbesondere in gekrümmten oder ovalen Kanälen.

Wie beim XP-endo® Finisher verleiht die einzigartige Legierung FKG MaxWire™ (Martensit-Austenit) dem Instrument die Fähigkeit, sich auszudehnen und sich zusammenzuziehen, so dass es schwer zugängliche Bereiche erreicht, insbesondere in gekrümmten oder ovalen Kanälen.

Mit seinem ISO-Durchmesser von 30 ist der **XP-FR** etwas starrer als der XP-endo® Finisher, wodurch er Guttapercha und Sealer entfernen kann.

Darüber hinaus weist der **XP-FR** aufgrund seiner kleinen Größe und seiner Null-Konizität eine einmalige Festigkeit gegen zyklische Ermüdung auf. Dieses einfach zu verwendende Instrument ist für alle Zahnärzte bestimmt, die den langfristigen Erfolg ihrer Revisionsbehandlung optimieren möchten.

Der **XP-FR** ist in den Größen 21 und 25 mm in sterilen 3er-Blisterverpackungen verfügbar.

Erhältlich ab Mai 2016

Weitere Informationen:

FKG Dentaire SA
Crêt-du-Loche 4
CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Schweiz
T. +41 32 924 22 44
info@fkg.ch
www.fkg.ch



XP-FR L21 – ISO 30 (Phase M)



XP-FR L21 – ISO 30 (Phase A)

S1.XB0.00.0AE.FK - XP-endo Finisher R, ISO 30, 21 mm, steril




XP-FR L25 – ISO 30 (Phase M)



XP-FR L25 – ISO 30 (Phase A)

S1.XB0.00.0AD.FK - XP-endo Finisher R, ISO 30, 25 mm, steril

Der **XP-FR** ist in zwei Größen erhältlich: 21 und 25 mm.
Verpackt in sterilen 3er-Blisterpackungen.

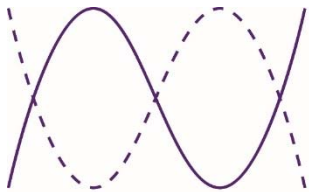

MaxWire

FKG MaxWire