


R-Motion[®]

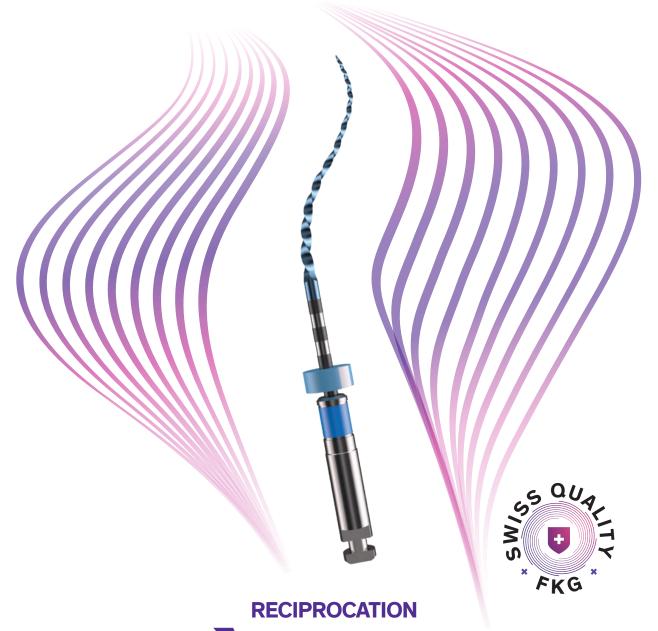

I PIÙ SICURI. SEMPLICI.

Facili da usare, mini invasivi. Perché fare un'altra scelta?

PERCHÉ FARE UN'ALTRA SCELTA?

In virtù degli standard di qualità svizzera FKG, l'ultima generazione di file a movimento alternato R-Motion[®] è più sicura dei principali prodotti della concorrenza.

IPIÙ SICURI*

La straordinaria soluzione tecnologica avanzata assicura un movimento alternato meno invasivo e offre un decisivo vantaggio in termini di sicurezza.

GAMMA DI PRODOTTI:

R-Motion® include una gamma di file in grado di soddisfare le esigenze di ogni applicazione.

LIME PER IL PERCORSO DI SCORRIMENTO R-Motion Glider R-Motion Glider C LIME DI SAGOMATURA R-Motion 20 R-Motion 25 R-Motion 30 R-Motion 40 R-Motion 50

Approfittate della tecnologia a movimento alternato che garantisce scorrevolezza e totale tranquillità. **SEMPLICI** Grazie all'agile design dei nostri file, la maggior parte delle applicazioni richiede la sequenza di due soli strumenti. Pura semplicità. UNA SOLA SEQUENZA ADATTA A PIÙ Casi PERCORSO DI **SAGOMATURA SCORRIMENTO** R-Motion 25 R-Motion Glider Scegliete il vostro file di sagomatura secondo l'approccio terapeutico R-Motion 30

^{*} In base a test interni di resistenza a fatica ciclica, rispetto a strumenti equivalenti della concorrenza.



MAGGIORE RESISTENZA ALLA FATICA CICLICA

Grazie al trattamento termico esclusivo, gli strumenti R-Motion® hanno una resistenza elevata alla fatica ciclica che riduce il rischio di frattura, aumentando la sicurezza del paziente.

FINOA 3.6 x VOLTEPIU RESISTENTI


MAGGIORE , FLESSIBILITÀ

Grazie all'esclusivo processo di trattamento termico, indicato dal colore blu dello strumento, R-Motion® offre una maggiore flessibilità, consentendo agli operatori di trattare una vasta gamma di anatomie del canale.

RIDUZIONE DELL'EFFETTO DI AVVITAMENTO

R-Motion® è stato studiato per ridurre l'effetto di avvitamento, consentendo all'operatore di controllare meglio la progressione nel canale.



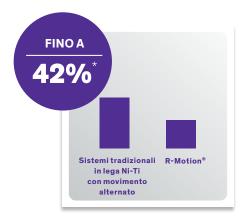


MENO INVASIVI

MAGGIORE RISPETTO DELL'ANATOMIA DEL CANALE

Sistemi tradizionali in lega Ni-Ti con movimento alternato

Il design e la maggiore flessibilità di R-Motion® migliorano la centratura e il rispetto dell 'anatomia del canale.

Il nucleo più sottile degli strumenti R-Motion® è meno invasivo rispetto alle lime della concorrenza, riducendo il rischio di una rimozione eccessiva di dentina e minimizzando l'impatto sulle aree non infette.

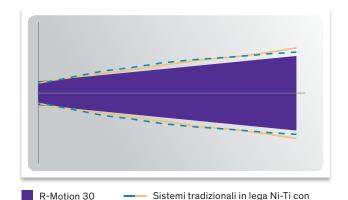

movimento alternato

MAGGIORE EFFICACIA DI TAGLIO

La sezione triangolare arrotondata con bordi taglienti e la nuova punta ottimizzata** offrono la combinazione perfetta per un'elevata efficacia di taglio fino all'apice, proteggendo la dentina.





STRESS RIDOTTO SULLA DENTINA

Il design esclusivo di R-Motion® e un nucleo più sottile riducono notevolmente lo stress sulla dentina durante il trattamento del canale radicolare.



- * In base ai risultati di laboratorio interni, confrontati con quelli degli strumenti equivalenti della concorrenza.
- ** Brevetto in corso.

RIFERIMENTI DEI PRODOTTI

STRUMENTI PER PERCORSO DI SCORRIMENTO CON MOVIMENTO ALTERNATO

R-Motion Glider			
	3×	21mm	S1.7B0.00.0GM.FK
15/.03	3×	25mm	S1.7B0.00.0GN.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0GO.FK

R-Motion Glider C				
-)	3×	21mm	S1.7B0.00.0HT.FK
15/.03		3×	25mm	S1.7B0.00.0HU.FK
		3×	31mm	S1.7B0.00.0HV.FK

STRUMENTI DI SAGOMATURA CON MOVIMENTO ALTERNATO

R-	M	oti	ion	20

	3×	21mm	S1.7B0.00.0HQ.FK
20/.04	3×	25mm	S1.7B0.00.0HR.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0HS.FK

R-Motion 25

- International Control of the Contr	3×	21mm	S1.7B0.00.0FR.FK
25/.06	3×	25mm	S1.7B0.00.0FS.FK
	3×	31mm	\$1.7B0.00.0ET.EK

R-Motion 30

	3×	21mm	S1.7B0.00.0Fl.FK
30/.04	3×	25mm	S1.7B0.00.0FL.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0F0.FK

R-Motion 40

#5 #5 #5 #5 #5 #5 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6 #6	3×	21mm	S1.7B0.00.0FJ.FK
40/.04	3×	25mm	S1.7B0.00.0FM.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FP.FK

R-Motion 50

The state of the s	3×	21mm	S1.7B0.00.0FK.FK
50/.04	3×	25mm	S1.7B0.00.0FN.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FQ.FK

PUNTE DI CARTA

Confezione da 200 punte di carta		
	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC

GUTTA PERCHA

Confezione da 60 Gutta Percha

25/.06	08.600.06.025.RE
30/.04	08.600.04.030.RE
40/.04	08.600.04.040.RE
50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™

Confezione da 60 BC Points

25/.06	08.650.06.025.RE
30/.04	08.650.04.030.RE
40/.04	08.650.04.040.RE
50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™

Siringa da 2g + 15 TotalFill BC Tips



TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

Confezione da 60 BC Points HiFlow

30/.04	08.650.04.030.HF
40/.04	08.650.04.040.HF
50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

Siringa da 1,5g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.008.XX





EMPOWER ENDO

FKG Dentaire Sàrl

Le Crêt-du-Locle 4 2322 Le Crêt-du-Locle Switzerland T+41 32 924 22 44

info@fkg.ch www.fkg.ch

