


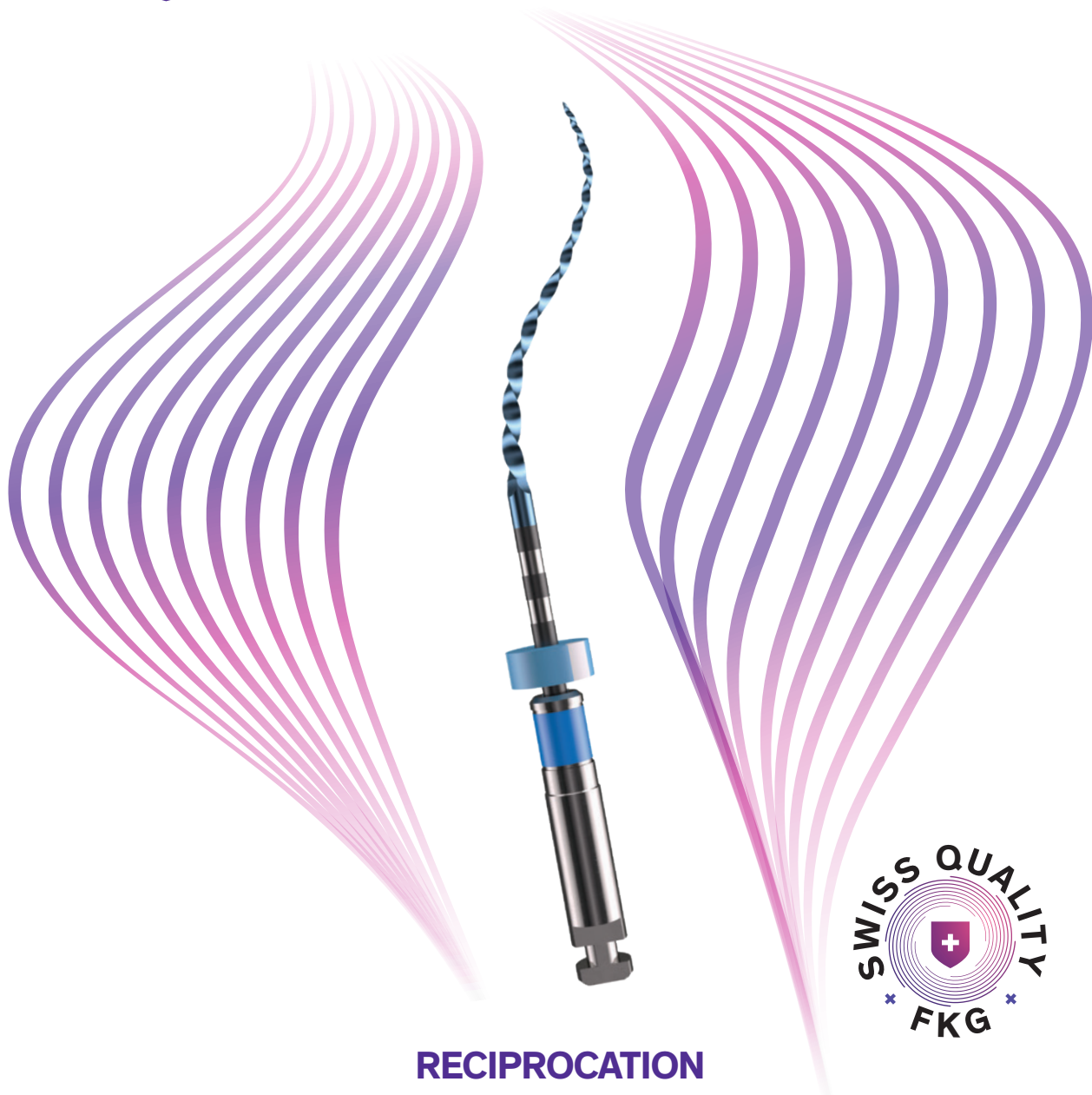

RECIPROCATION

DE VEILIGSTE. EENVODIGWEG.

Gemakkelijk in het gebruik, minimaal invasief.
Waarom voor iets anders kiezen?

WAAROM VOOR IETS ANDERS KIEZEN?

De nieuwste generatie reciprook werkende R-Motion®-vijlen is veiliger dan die van de belangrijkste concurrenten, dankzij de Zwitserse kwaliteitsnormen die door FKG worden nageleefd.

DE VEILIGSTE*

Door een unieke combinatie van geavanceerde technologieën is het reciprook werkende systeem minder invasief en heeft het enorme voordelen op het gebied van veiligheid.

PRODUCTLIJN:

R-Motion® omvat een reeks vijlen waarmee aan de behoeften voor iedere casus wordt voldaan.

GLIJPADVIJLEN

R-Motion Glider



R-Motion Glider C



VORMGEVINGSVIJLEN

R-Motion 20



R-Motion 25



R-Motion 30



R-Motion 40



R-Motion 50



GEMAKKLIJK IN HET GEBRUIK

Geniet van een reciprook werkende technologie die gemakkelijk in het gebruik is en u volledige gemoedsrust biedt.

EENVOUDIG

Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze vijlen is in de meeste gevallen een vijlsequentie van twee instrumenten reeds voldoende. De eenvoud zelf.

EEN VIJLSEQUENTIE VOOR DE MEESTE CASUSSEN

GLIJPADVIJLEN

GLIJPADVORMGEVING

R-Motion
Glider



R-Motion 25




↑
Kies uw
vormgevingsvijl op
basis van uw manier
van uw therapeutische
benadering
↓

R-Motion 30



* Op basis van interne cyclische vermoeingstests, vergeleken met gelijkwaardige instrumenten van concurrenten.

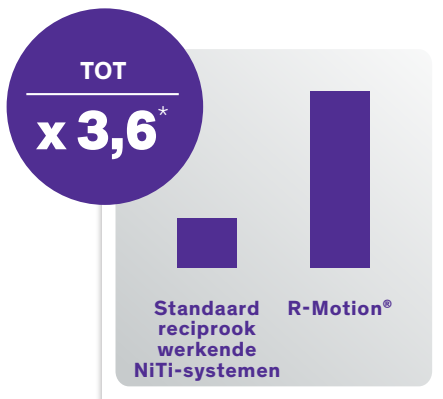

BETER BESTAND TEGEN CYCLISCHE VERMOEIING

R-Motion®-instrumenten zijn dankzij de door ons ontwikkelde warmtebehandeling zeer goed bestand tegen cyclische vermoeiing. Het is bekend dat een hogere weerstand tegen cyclische vermoeiing het risico op breuk van het instrument vermindert, en dus de veiligheid van de patiënt verbetert.





TOT 3,6x MAAL HOGERE WEERSTAND

MEER FLEXIBILITEIT

Dankzij een exclusieve warmtebehandeling, te herkennen aan de blauwe kleur van het instrument, biedt R-Motion® een verbeterde flexibiliteit, waardoor tandartsen een breed spectrum aan verschillende kanaalanatomieën kunnen behandelen.

LAGER SCHROEFEFFECT

R-Motion® is ontworpen om het schroefeffect te verminderen, zodat de tandarts een betere controle heeft over de progressie in het kanaal.

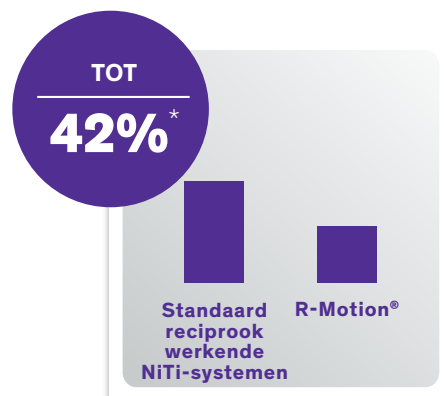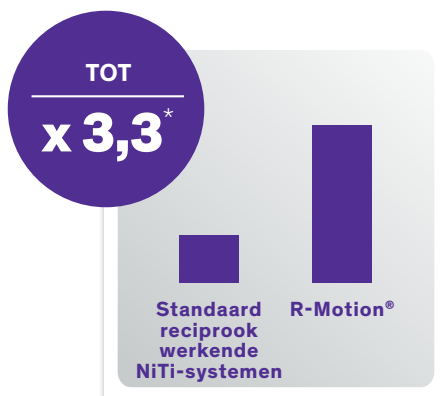



* Gebaseerd op interne laboratoriumresultaten, vergeleken met gelijkwaardige instrumenten van concurrenten.

MINDER INVASIEF

HOUDT BETER REKENING MET DE KANAALANATOMIE

Door de grotere flexibiliteit en het ontwerp van de R-Motion® laat het instrument zich beter centreren en wordt beter rekening gehouden met de kanaalanatomie.

Doordat R-Motion®-instrumenten een dunner kernformaat hebben, zijn deze vijlen minder invasief dan gelijkwaardige vijlen van concurrenten, waardoor het risico op te sterke verwijdering van dentine gereduceerd en de invloed op niet-geïnfekteerde gebieden geminimaliseerd wordt.

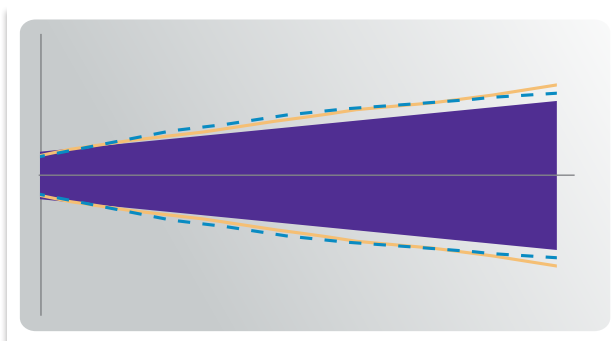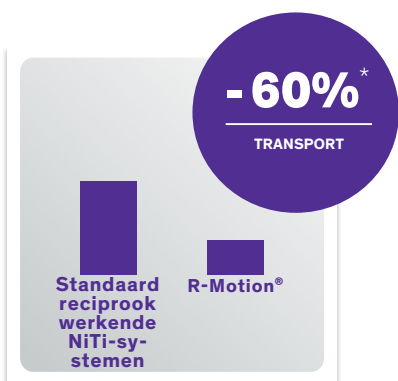

R-Motion 30 Standaard reciproom werkende NiTi-systemen


VERBETERDE SNIJ-EFFICIËNTIE

Door de afgeronde, driehoekige dwarsdoorsnede, voorzien van scherpe snijranden en de nieuwe, geoptimaliseerde vijltip**, ontstaat een perfecte combinatie voor een hoge snijefficiëntie tot aan de apex, met behoud van de dentine.



MINDER BELASTING VAN DE DENTINE

Het exclusieve R-Motion®-ontwerp en het dunner kernformaat verminderen de belasting van de dentine tijdens een wortelkanaalbehandeling aanzienlijk.

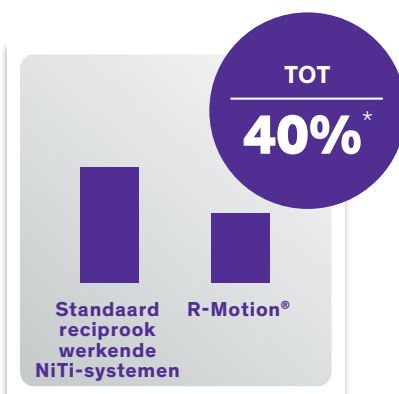

* Gebaseerd op interne laboratoriumresultaten, vergeleken met gelijkwaardige instrumenten van concurrenten.

** Patent aangevraagd.

PRODUCTREFERENTIES

RECIPROOK WERKENDE GLIJPADINSTRUMENTEN

R-Motion Glider

 15/.03	3×	21 mm	S1.7B0.00.0GM.FK
	3×	25 mm	S1.7B0.00.0GN.FK
	3×	31 mm	S1.7B0.00.0GO.FK

R-Motion Glider C

 15/.03	3×	21 mm	S1.7B0.00.0HT.FK
	3×	25 mm	S1.7B0.00.0HU.FK
	3×	31 mm	S1.7B0.00.0HV.FK

RECIPROOK WERKENDE VORMGEVINGSINSTRUMENTEN

R-Motion 20

 20/.04	3×	21 mm	S1.7B0.00.0HQ.FK
	3×	25 mm	S1.7B0.00.0HR.FK
	3×	31 mm	S1.7B0.00.0HS.FK

R-Motion 25

 25/.06	3×	21 mm	S1.7B0.00.0FR.FK
	3×	25 mm	S1.7B0.00.0FS.FK
	3×	31 mm	S1.7B0.00.0FT.FK

R-Motion 30

 30/.04	3×	21 mm	S1.7B0.00.0FI.FK
	3×	25 mm	S1.7B0.00.0FL.FK
	3×	31 mm	S1.7B0.00.0FO.FK

R-Motion 40

 40/.04	3×	21 mm	S1.7B0.00.0FJ.FK
	3×	25 mm	S1.7B0.00.0FM.FK
	3×	31 mm	S1.7B0.00.0FP.FK

R-Motion 50

 50/.04	3×	21 mm	S1.7B0.00.0FK.FK
	3×	25 mm	S1.7B0.00.0FN.FK
	3×	31 mm	S1.7B0.00.0FQ.FK

PAPIERPUNTEN

Doos met 200 papierpunten

	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC

GUTTAPERCHA

Doos met 60 guttaperchapunten

	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™

Doos met 60 BC Points

	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™

Injectiespuit 2 g + 15 TotalFill BC-tips



08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

Doos met 60 BC Points HiFlow

	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

Injectiespuit 1,5 g + 15 TotalFill BC-tips



08.650.00.008.XX

www.fkg.ch/r-motion



EMPOWER ENDO

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Switzerland
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch