



FKG
swiss endo



Limes Niti rotatives
pour cathétérisme
mécanisé

FR

Race ISO 10

Instruments dédiés aux canaux calcifiés ou très étroits

► La gamme FKG Race

Référence internationale, Race (pour « Reamer with Alternating Cutting Edges ») est la gamme la plus complète de limes NiTi rotatives pour le traitement canalaire.

Race ISO 10

Instruments de cathétérisme pour canaux calcifiés ou très étroits

Race ISO 10 se décline en trois instruments de diamètre ISO 10 et de conicité .02, .04 et .06 ; une véritable prouesse technique ! Les Race ISO 10 sont destinés à atteindre la longueur de travail (LT) dans les canaux calcifiés ou très étroits, lorsque les limes K manuelles ISO 06 ou 08 ne peuvent plus progresser. Les Race ISO 10 sont entraînés à une vitesse de rotation de 600 à 800 tr/min. Les Race ISO 10

permettent de préparer un passage plus rapidement et de manière plus sûre qu'avec des instruments manuels. Grâce à leur faible diamètre et leur extrême flexibilité, les Race ISO 10 suivent parfaitement l'anatomie du canal, même dans les tiers médians et apicaux. Ils sont utilisés sans pression jusqu'à la LT. La mise en forme canalaire pourra se poursuivre à l'aide des séquences iRace ou BioRace.

Illustration d'un cas avec canaux étroits et calcifiés

Avec l'aimable autorisation du Dr Gilberto Debelian (Norvège)



Pré-opératoire
Diagnostic : pulpite

Difficultés :
Canaux étroits, calcifiés

Post-opératoire
MB & DB - 35/.04
P - 50/.04

Les spécificités de la gamme FKG Race

Plusieurs innovations technologiques exclusives expliquent l'efficacité de l'ensemble de la gamme Race et son succès mondial :

- Pointe de sécurité arrondie exclusive pour le guidage précis de l'instrument
- Arêtes de coupe alternées afin d'éliminer l'effet de vissage
- Arêtes vives pour une efficacité de coupe optimale
- Polissage électro-chimique du NiTi pour une résistance accrue à la torsion et à la fatigue
- SafetyMemoDisc (SMD) pour une maîtrise de la fatigue du métal


Disponibilité Race ISO 10

Blister stérile
25 mm

Séquence Race ISO 10 (x2)
Instruments individuels (x6)

Blister non-stérile
21/25/31 mm

Séquence Race ISO 10 (x2)
Instruments individuels (x6)

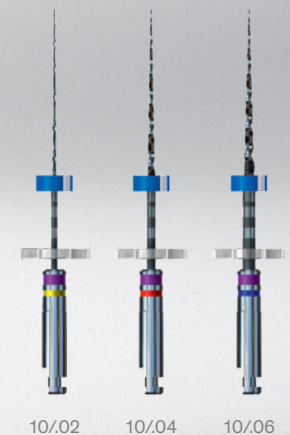



FKG Dentaire SA

Société suisse fondée en 1931, FKG Dentaire SA a connu un nouvel essor en 1994, lorsque Jean-Claude Rouiller a pris les rênes de l'entreprise.

Il l'a amenée à la pointe du développement, de la fabrication et de la distribution de produits dentaires destinés aux omnipraticiens, aux endodontistes et aux laboratoires.

La stratégie de FKG est axée sur des produits innovants et de haute précision et sur la conception d'instruments spécifiquement dédiés au monde dentaire, dans l'objectif d'offrir des solutions répondant aux besoins les plus pointus des utilisateurs.

En 2011, Thierry, fils de Jean-Claude Rouiller, a repris la direction de FKG. Sous son impulsion, le réseau de distributeurs

s'est fortement développé et permet aux instruments de FKG d'être disponibles dans une centaine de pays dans le monde entier.

En 2012, le Swiss Venture Club a récompensé FKG pour son dynamisme, la qualité de ses produits et son sens de l'innovation.

Dotée depuis 2013 d'une salle blanche, FKG Dentaire développe sa gamme de produits stériles.

En 2013 et 2014, des centres de formation, disposant d'infrastructures de pointe, ont été inaugurés à La Chaux-de-Fonds, Dubai et Oslo.

L'entreprise est certifiée selon les normes et exigences réglementaires.



FKG Dentaire SA, Crêt-du-Loclé 4, CH-2304 La Chaux-de-Fonds, Switzerland
T +41 32 924 22 44, info@fkg.ch, www.fkg.ch