



FKG
swiss endo



Limes Niti rotatives
pour cathétérisme
mécanisé

FR

ScoutRace

Séquence dédiée aux canaux à courbures sévères



► La gamme FKG Race

Référence internationale, Race (pour « Reamer with Alternating Cutting Edges ») est la gamme la plus complète de limes NiTi rotatives pour le traitement canalair.

ScoutRace

Séquence dédiée aux canaux à courbures sévères

ScoutRace est une séquence de trois instruments de conicité .02 et de diamètres ISO 10, 15 et 20. Ils sont destinés au cathétérisme mécanisé des canaux à courbures sévères ou de type « S ». Instruments de premier passage, entraînés à une vitesse de 600 à 800 tr/min, ils sont utilisés après la détermination de la longueur de travail (LT). Les ScoutRace permettent de préparer un passage plus rapidement et de manière plus

sûre qu'avec des instruments manuels. On observe un meilleur respect de l'anatomie du tiers médian et apical, sans transport ni formation de butée. Grâce à leur conicité de .02 et leur extrême flexibilité, les ScoutRace suivent parfaitement l'anatomie du canal et sont utilisés sans pression jusqu'à la LT. La mise en forme canalair se fera ensuite à l'aide des instruments FKG dédiés.

Illustration d'un cas avec forte courbure apicale

Avec l'aimable autorisation du Dr Gilberto Deblan (Norvège)



Pré-opératoire
Diagnostic : pulpite

Difficulté :
Double courbe

Post-opératoire
Préparation : 35/.04

Les spécificités de la gamme FKG Race

Plusieurs innovations technologiques exclusives expliquent l'efficacité de l'ensemble de la gamme Race et son succès mondial :

- Pointe de sécurité arrondie exclusive pour le guidage précis de l'instrument
- Arêtes de coupe alternées afin d'éliminer l'effet de vissage
- Arêtes vives pour une efficacité de coupe optimale
- Polissage électro-chimique du NiTi pour une résistance accrue à la torsion et à la fatigue
- SafetyMemoDisc (SMD) pour une maîtrise de la fatigue du métal


Disponibilité ScoutRace

Blister stérile
25 mm

2 × 1 Séquence ScoutRace
6 × Instruments individuels

Blister non-stérile
21/25/31 mm

2 × 1 Séquence ScoutRace
6 × Instruments individuels

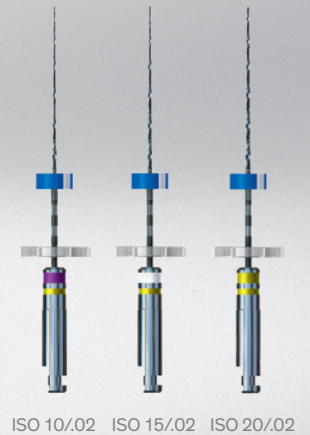



FKG Dentaire Sàrl

Société suisse fondée en 1931, FKG Dentaire Sàrl a connu un nouvel essor en 1994, lorsque Jean-Claude Rouiller a pris les rênes de l'entreprise.

Il l'a amenée à la pointe du développement, de la fabrication et de la distribution de produits dentaires destinés aux omnipraticiens, aux endodontistes et aux laboratoires.

La stratégie de FKG est axée sur des produits innovants et de haute précision et sur la conception d'instruments spécifiquement dédiés au monde dentaire, dans l'objectif d'offrir des solutions répondant aux besoins les plus pointus des utilisateurs.

En 2011, Thierry, fils de Jean-Claude Rouiller, a repris la direction de FKG. Sous son impulsion, le réseau de distributeurs

s'est fortement développé et permet aux instruments de FKG d'être disponibles dans une centaine de pays dans le monde entier.

En 2012, le Swiss Venture Club a récompensé FKG pour son dynamisme, la qualité de ses produits et son sens de l'innovation.

Dotée depuis 2013 d'une salle blanche, FKG Dentaire développe sa gamme de produits stériles.

En 2013 et 2014, des centres de formation, disposant d'infrastructures de pointe, ont été inaugurés à La Chaux-de-Fonds, Dubai et Oslo.

L'entreprise est certifiée selon les normes et exigences réglementaires.



FKG Dentaire Sàrl, Le Crêt-du-Loche 4, 2322 Le Crêt-du-Loche, Switzerland
T +41 32 924 22 44, info@fkg.ch, www.fkg.ch