

## FKG Dentaire lance une nouvelle séquence rapide, efficace et sûre: *iRaCe*


### Description

Grâce à leurs caractéristiques exclusives, seulement 3 instruments NiTi rotatifs *iRaCe* sont nécessaires pour traiter la plupart des cas (droits, légèrement courbes et/ou larges). La séquence *iRaCe* est très facile à apprendre et simple à utiliser, signifiant un gain de temps considérable.


Les instruments *iRaCe* sont dotés des caractéristiques suivantes :

- *Pointe de sécurité arrondie exclusive* : Guidage précis
- *Arêtes de coupe alternées* : Ni vissage, ni aspiration
- *Arêtes vives* : Coupe plus efficace = gain de temps
- *Polissage électro-chimique* : Résistance accrue à la torsion et à la fatigue cyclique
- *SafetyMemoDisc (SMD)* : Contrôle de la fatigue et du nombre d'utilisations
- *Nouveau manche* : Repérage facile du diamètre ISO (bague large) et de la conicité (bague étroite : jaune : 2%, rouge : 4%, bleu : 6%)


# *iRaCe*

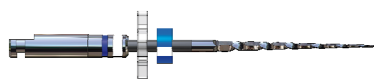

15/06

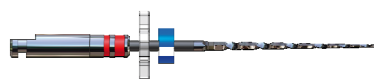


25/04

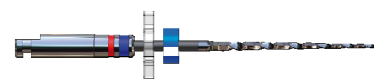


30/04

Deux instruments complémentaires ont été développés afin de permettre le traitement des cas difficiles (fortement courbes, étroits et/ou calcifiés): *iRaCe Plus*

# *iRaCe Plus*

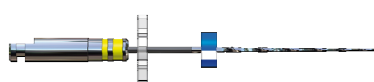

20/02

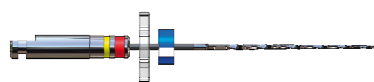

25/02

### Disponibilité

- Séquence *iRaCe* (3 instruments/blister)
- *iRaCe Plus* (2 instruments de chaque/blister)
- Recharges (6 pces/blister)
- Longueur: 21 / 25 / (31 mm, délai de livraison plus long)

### Site Internet

[www.irace.ch](http://www.irace.ch)